


LabSen 761 Elektrode

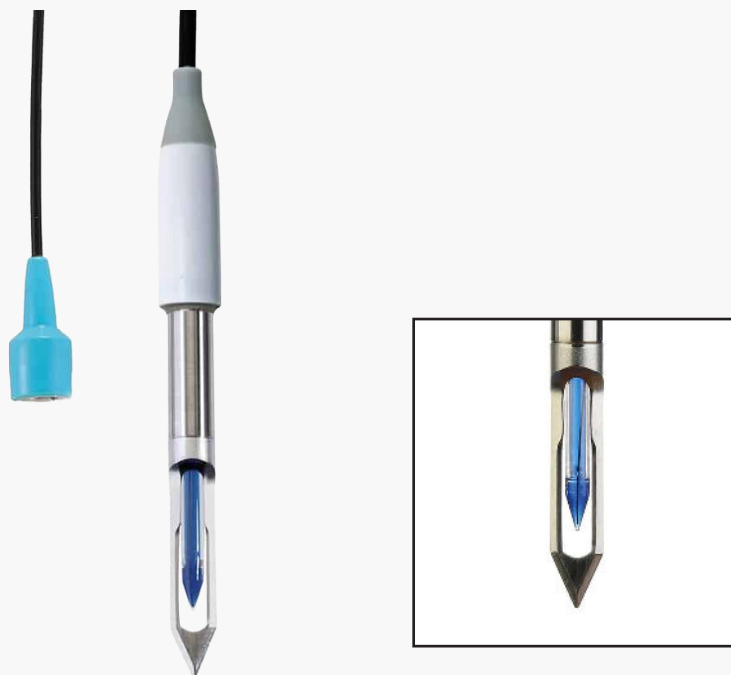

Hauptmerkmale

- Integrierter Temperatursensor, patentierte Schweizer Sensortechnologie und Materialien
- Klinge für pH-Messung von Fleisch, Fisch und halbgefrorenen Lebensmitteln
- Klinge aus lebensmitteltauglicher Titanlegierung, leicht zu reinigen
- Spitze Glasmembran liefert stabile Messwerte in 15–30 Sekunden, bis zu 10-mal robuster als herkömmliche Elektroden
- Polymer-Elektrolyt mit Loch-Diaphragma-Struktur verhindert Verstopfung; kein Nachfüllen nötig
- Langlebiges Referenzsystem (Glasrohr, AgCl, Referenzsilberdraht) verbessert Stabilität und Lebensdauer
- Integrierter Temperatursensor ermöglicht automatische Temperaturkompensation
- Kompatibel mit allen pH-Messgeräten mit BNC-Anschluss

Technische Daten

Messbereich	(0 ~ 14) pH	Elektrolyt	Polymer
Empfohlene Einsatztemperatur	(0 ~ 80)°C	Aufbewahrungslösung	3M KCl
Schaftmaterial	Titan Klinge	Membranwiderstand	<250 MΩ
Glasmembran Typ	S	Elektrodenabmessung	(Ø12×115) mm
Referenzsystem	Long Life	Anschluss	BNC
Diaphragma	Keramik+Einzelpore	Kabel	Ø3mm×1m